# NKLE [足首]

捻挫を2つの分類に分けて予防する製品を開発しました。

#### レースアップの安全性SAFTYと安定性STABILITY

●足の骨格に直接圧を加え、足裏の足底筋膜を刺激し一体感を形成します。


②テーピングと違い、汗による緩みがないので、固定力を維持できます。

❸難しいテーピングの技術が必要ありません。



## THE ONE ANKLE BRACE ザ ワン アンクルブレイス

#### 軽量で薄いボディ/激しいスポーツに最適/強い固定を求める競技者に

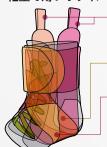

レースアップ付け根のしっかりした素材と、2本 の非伸縮ストラップが相互に働き合い、しっか りとした固定で過度な底屈を防ぐ

ねじれを防ぐ強い非伸縮ストラップ

Muellerのロゴは滑り止めラバーになっていま す。2本のストラップが交差した時に、互いに密 着しズレずに固定力を発揮

1	左右兼用		拥	レースア	ップタイプ	
ı	品 名		名	ザ ワン アンクルブレイス		
ı	品		番	51880	51881	51882
	サ	イ	ズ	XS	S	М
į	靴のサイズ		イズ	24~25cm	25~27cm	27~29cm
カ ラ ー ブラック						
	価 格 ¥5,200+税			ť		








HG80® PREMIUM SOFT SHELL ANKLE BRACE

## Hg80®プレミアム・ソフトシェル アンクルブレイス

#### 軽量で速乾性のボディ/柔軟性ある固定が可能

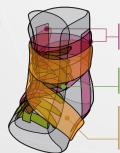

両サイドの非伸縮性スターアップストラッ プは、足首の位置をまっすぐに保つ

前方のレースアップが、ジャンプの着地の 衝撃を吸収

2本の伸縮性フィギュア8ストラップは、 着地時の土踏まずを中心としたねじれを


左右兼用			レースア	ップタイプ		
品 名		名	Hg80®プレミアム・ソフトシェル アンクルブレイス			
品		番	59330	59331	59332	
サ	イ	ズ	XS	S	М	
靴の	)サ-	イズ	24~25cm	25~27cm	27~29cm	
カ	ラ	_	ブラック			
価		格	¥4,800+税			









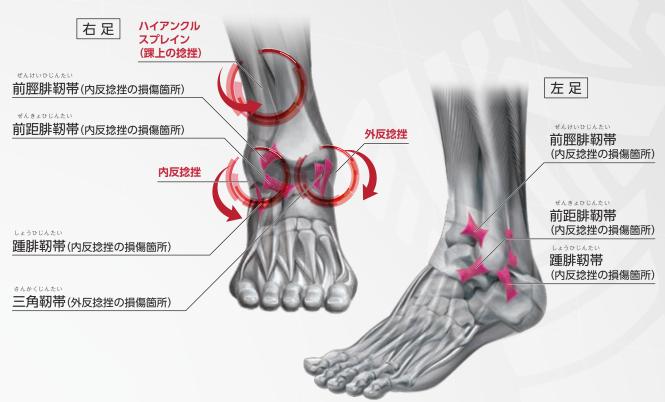



## HG80® PREMIUM HARD SHELL ANKLE BRACE [LEFT / RIGHT] Hg80®プレミアム・ハードシェル アンクルブレイス [左足用・右足用]

捻挫後のリハビリ中に/Mueller独自のプラスチックプレートと衝撃吸収パッドでしっかり固定 圧迫感のないバックオープンタイプ



非伸縮ストラップで、 足首の位置をまっすぐに保ち、 内反・外反の捻挫を予防

左右のプラスチックシェルの内側に衝撃 吸収エアーパッドを内蔵

ストレスフリーのバックオープンタイプで、 スピーディーに装着可能

左用·右用	プラス	チックシェ	ルタイプ	Ĵ
品 名	Hg80®プレミアム・ハードシェル アンクルブレイス			
品 番	59311	59312	59321	59322
サイズ	S左用	M 左用	S右用	M 右用
靴のサイズ	25~ 27cm	27~ 29cm	25~ 27cm	27~ 29cm
カラー	ブラック			
価 格	¥6,800+税			










### ADJUSTABLE ANKLE STABILIZER JP PLUS

## アジャスタブル アンクルスタビライザー JPプラス

軽量スタビライザーパネルとフィギュア8ストラップのダブルサポート 通気性・抗菌性に優れたHydramesh®素材

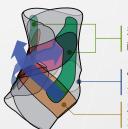

着地時の過度なねじれを防ぐ 両サイドの軽量スタビライザーパネル

快適な装着感とフィット感の かかとオープンタイプ

足首を強く固定する	
2本のフィギュア8ストラップ	プ

左右兼用		ラップタイ	プ
品 名		アジャスタブル アンクルスタビライザー JPプラス	
品	番	51548	51549
サィ	(ズ	S~M	L~XL
靴のt	ナイズ	21~25cm	25~31cm
カラー		ブラック	
価 格		¥3,40	00+税








## ANKLE [足首]



## **ADJUSTABLE** ANKLE SUPPORT JP PLUS

## アジャスタブル アンクルサポート JPプラス

#### 伸縮性クロスベルトが固定力を調整 足首の怪我と再発防止に

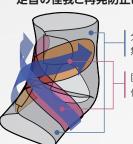

分割タブが足首に 無駄なくフィット

固定力を自由に調整できる 伸縮性クロスベルト

左右	兼用	ラップタイ	プ
品	名	アジャスタブル アンクルサポート JPプラス	
品	番	54478	54479
サィ	ſ ズ	S~M	L~XL
靴のた	ナイズ	22~25cm	25~31cm
カラ	<del>-</del>	ブラック	
価 格		¥2,10	00+税







## ALL-PURPOSE WONDER WRAP™ ANKLE

## ワンダーラップ アンクル

#### 洗って何度も使える経済的な伸縮包帯 一日中つけていても軽量で快適

様々な形状にフィットする伸縮素材 足首、肘などの小さなボディーパーツに最適 マジックテープ式のタブで簡単装着

左右兼用	ラップタイプ
品 名	ワンダーラップ アンクル
品 番	54590
サイズ	フリーサイズ
ラップ幅·長さ	幅7.6cm×長さ70cm
カラー	ベージュ
価 格	¥1,400+税



## NADAL PRO STRIPS® ナダル プロ ストリップス

#### スポーツ器具による、擦り剥け・皮膚剥離の予防 摩擦が起こりやすいスポーツに

メッシュ状で通気性の良い粘着ストリップ。指や 手の平などの皮膚の擦りむけ予防に効果的。ま め、たこ、靴擦れなどをガードすることにも有効で す。症状に合わせてカットしてご使用ください。

品		名	ナダル プロ ストリップス
品		番	50954
サ	イ	ズ	101mm幅×203mm
1パッ	ク内	数量	8枚入り
1ケー	ス内	数量	6パック
価		格	¥1,500+税
ケー	ス値	格	¥9,000+税









#### PF TAPE®

## PFテープ(足底筋膜サポートテープ)

#### 足底筋膜の問題点を解決


レーヨン製非伸縮テープ

日常生活、ランニング後の足裏のケアに最適

24時間使用可能

就寝時に使用可能

貼り方マニュアル付き

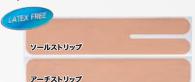













品 名	足底筋膜サポートテープ
品 番	56337
カラー	ベージュ
テーブ幅·長さ	(ソールストリップ)幅57mm/(アーチストリップ)幅45mm×長さ26cm
1パック入り数	4枚入り
1ケース内数量	4パック
価 格	¥1,600+税
ケース価格	¥6,400+税



## PRECUT KINESIOLOGY TAPE® プレカット・キネシオロジーテープ 50mm(は<離紙つき)

#### 25cmにカットされた プレカットタイプ

角丸形状

貼り方マニュアル付き

2色のカラーバリエーション

LATEX FREE
20 25
機能的なウェーブ加工

品 名	プレカット・キネシオロジーテープ		
品 番	55617	55647	
カラー	ブラック	ベージュ	
テープ幅	50mm		
テープ長さ	長さ25cm20カット入り (全長5m)		
1ケース内数量	12個		
価 格	¥1,20	00+税	
ケース価格	¥14,4	00+税	

#### キネシオロジーテープもお勧めです

## プレカット・キネシオロジーテープの貼り方

テープは25cmの長さにカットしてありますが、狭い部位に使用する場合は、貼る部位に応じてカットしてください。 ミューラージャパンのWEBサイトでもご覧いただけます。www.muellerjapan.com

#### POINT!

部位によってテープを貼る 際の引く力が異なります。

#### 1 足底筋膜サポートテープ





## POINT 引く力: 50%

①テープの先を5~7c mの長さに4等分しま す。足首を90度に固 定し、指の付け根から 踵の方向にテープを 貼ります。

②足底の中心部を一回 り留めます。

#### 2 ローアーチサポートテープ





#### POINT 引く力: 50%

①テープを縦に半分に カットしてください。足 底の中心部から母指球 周辺部を引き上げるよ うに貼ります

②①から半分ずらして2枚目を貼ります。

#### ③ アキレス腱サポートテープ



#### POINT 引く力: 20~30%

①足首を少し前に下げ ます。踵からふくらは ぎ方向に縦にテーフ を貼ります

②踵に、横方向にテープ を貼ります。

#### 4 シンスプリントサポートテープ



## POINT 引く力: 20~30%

①内くるぶしから、引き上げながら、 ひざの外側に斜めに貼ります。 ②痛みのある部位に、Yテ を横方向に貼ります。

〈Yテープの作り方〉 テープを三つ折りにし、中央 を1/3残して縦にカットしてく

